

KÄYTTÖ:

- 1 Puhdista haava saippualla ja vedellä tai fysiologisella liuoksella (NaCl 0,9%).
- 2 Ravista pulloa voimakkaasti muutaman sekunnin ajan.
- 3 Suihkuta 5 ja 10 cm etäisyydellä haavasta. *Suihkutus tuntuu viileältä ja saatat tuntea painetta. Tämä johtuu ponneaineesta.*
- 4 Pyyhi venttiili puhtaalla, kuivalla liinalla ja sulje pullo tiiviisti.

Peitä haava tarvittaessa sidoksella. Älä poista jauhetta haavasta, se poistuu ruven mukana.

VAROITUS: Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Paineistettu pullo: voi räjähtää kuumennettaessa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muuhun sytytyslähteeseen. Älä rei'itä tai polta edes käytön jälkeen. Suojaa auringon säteilyltä. Älä altista yli 50°C:n lämpötilalle. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten määräysten mukaisesti.

DK www.stophemo.dk

SAMMENSÆTNING: Bioaktivt calciumlignat*-pulver (*havtangeekstrakt) og drivmiddel (butan/propan/isobutan-blanding).

INDIKATIONER: Blødning og heling af overfladiske hudsår (snitsår, hudafskrabninger, rifter, folder, væskende intertrigo osv.).

KONTRAINDIKATION: Må ikke bruges i ansigtet eller på slimhinder.

FORHOLDSREGLER VED BRUG: Hvis blødningen fortsætter, skal du kontakte en læge. Genbrug ikke pulver, der allerede er påført et sår. Må ikke indåndes.

INTERAKTIONER: Må ikke anvendes sammen med antiseptiske midler, der indeholder natriumhypoklorit, klorhexidin, benzalkoniumklorid eller kobbersalte. Skyl om nødvendigt grundigt med 0,9% NaCl før brug.

UØNSKEDE VIRKNINGER: Ingen kendte til dato.

SÅDAN BRUGES DEN:

- 1 Rens såret med vand og sæbe eller saltvand (0,9% NaCl).
- 2 Ryst flasken kraftigt i et par sekunder.
- 3 Spray 5-10 cm fra såret. *Udgangstrykket og fornemmelsen af kulde kan være overraskende. De fremkaldes af drivgassen*
- 4 Tør ventilen af med en ren, tør klud, og luk flasken tæt.

Dæk såret med en forbinding, hvis det er nødvendigt. Fjern ikke pulveret fra såret, da det vil blive fjernet sammen med sårkorpen.

FARE: Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: kan sprænges under påvirkning af varme. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og enhver anden antændelseskilde. Du må ikke ryge. Må ikke sprøjtes på åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Opbevares utilgængeligt for børn. Bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.

SPRAY

stop hémo


SE Stoppa blødning, Läkande verkan

FI Tyrehdyttää verenvuodon, Parantava vaikutus

DK Stop blødning Helbredende handling

Pulver
Jauhe
Pulver

3 700327 200035

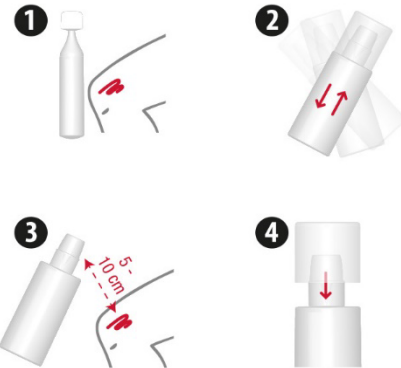

SE www.stophemo.se

SAMMANSÄTTNING: Bioaktivt kalciumlignatpulver* (*från sjögräs) och drivgas (butan/propan/isobutan-blandning).

INDIKATIONER: Blödning och läkning av ytliga hudsår (skärsår, skrapår, rivmärken, veck, intertrigo med utsöndring...).

KONTRAINDIKATIONER: Använd inte i ansiktet eller på slemhinnor.

VARNING OCH FÖRSIKTIGHET: Vid ihållande blödning, kontakta läkare. Återanvänd inte pulver som redan har använts på ett sår. Andas inte in.

INTERAKTIONER: Använd inte med antiseptika som innehåller natriumhypoklorit, klorhexidin, benzalkoniumklorid eller kopparsalter. Vid behov, skölj noggrant med NaCl 0,9% innan du använder sprayen.

BIVERKNINGAR: Inga kända till dags datum.

ANVÄNDNING:

- 1 Rengör såret med tvål och vatten eller fysiologiskt serum (NaCl 0,9%).
- 2 Skaka flaskan kraftigt under några sekunder.
- 3 Spraya på 5 - 10 cm avstånd från såret. *Leverangstrycket och den kylande känslan kan vara överraskande. Det orsakas av drivgasen.*
- 4 Torka valvöppningen med en ren torr trasa och stäng flaskan ordentligt.

Täck såret med ett omslag om det behövs. Försök inte att ta bort pulvret från såret eftersom detta kommer att tas bort med sårkorpan.

FARA : Ekstremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Avfallshantera i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella regleringar.

FI www.stophemo.fi

KOOSTUMUS: Bioaktiivinen kalsiumlignaatijauhe* (*merilevästä) ja ponneaineikaasu (butaani/propani/isobutaani-seos).

INDIKAATIO: Pinnallisten ihohaavojen verenvuotojen tyrehdyttäminen ja parantaminen (viillot, raapaisu, naarmut, eritteiset haavaumat...).

KONTRAINDIKAATIO: Älä käytä kasvoille tai limakalvoille.

KÄYTÖN VAROITIMET: Verenvuodon jatkuessa ota yhteys lääkäriin. Älä käytä uudelleen haavaan jo levitettyä jauhetta. Älä hengitä ainetta.

VOUROVAIKUTUKSET: Ei saa käyttää emäksisten liuosten (esim. natriumhypokloriittipohjaisten desinfiointiainesten) tai klooriheksidiiniä, bensalkoniumkloridia tai kuparisuoloja sisältävien liuosten kanssa. Tarvittaessa huuhtele huolellisesti NaCl 0,9% ennen käyttöä.

SIVUVAIKUTUKSET: ei tiedossa.